

Brukerveiledning for ikke ladbare høreapparat


Sjekk om apparatet virker ved å legge apparatet i hånden og lukk den forsiktig. Dersom det er på, vil du høre det piper. Piper det ikke, bytt batteri. Husk å bruke rett type batteri, og sette det inn riktig vei. Plassér apparatet bak øret med slangen foran øret og ned mot øregangen. Apparat med rødt merke skal på brukers høyere øre og apparat med blått merke skal på brukers venstre øre. Skyv så receiveren med dome forsiktig inn i øret.



Reciver



Dome

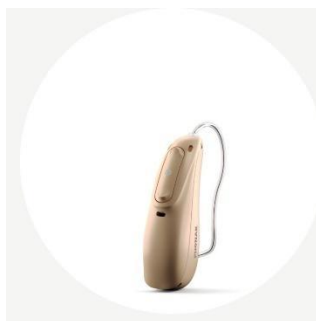

Høreapparat

Vedlikehold av høreapparater

Ørevoks, vann, støv og smuss er høreapparatets fiende og kan påvirke lyd kvaliteten. Den hyppigste årsaken til at høreapparater må repareres er nettopp ørevoks og fuktighet i apparatet. Derfor er det viktig med daglig rengjøring. Da kan høreapparatene yte sitt beste, og du hører bedre.

Dette kan du gjøre selv:

Rengjør høreapparatene daglig.

Tørk av høreapparatet og propp/dome hver kveld og bruk gjerne renseservietter.

Sjekk voksfiler og mikrofonfiler jevnlig, og skift ved behov. Når filteret er tett, hører du dårligere.

Bruk tørkeprodukter for å trekke fuktighet ut av høreapparatene. En god rutine er å legge høreapparatene i en tørkeboks over natten, så er de klar til neste dag.

Bytt domer ved behov.